



# AEDを用いた一次救命措置の流れ

自動体外式除細動器

**1** 人が倒れています。

**1** 倒れている人を発見したら声を掛けて意識の有無を確認します。

意識が無ければ...



**2** 119番の要請。自動体外式除細動器AEDの要請。



## 除細動成功

パッドは装着したまま回復体位をとらせます。



回復体位

**3** 気道を確認し、呼吸の有無を確認。

見る、聞く、感じる



**4** 2回息を吹き込み、循環のサインを確認。

循環のサインが無ければ...

息、咳、体動 無し



**5** 心臓マッサージを行う。

1分間に100回の速さで15回



### AED 到着

**8** エネルギー充電完了、通電ボタンを押す。



自分、その他の人が離れていることを確認します。

**7** 解析しています。




**6** 電源を入れ、パッドを装着しコネクタを接続。



電源を入れた後、音声ガイダンスに従います。

**1**

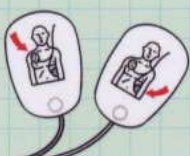

パッドに描かれた図の通りにパッドを装着します。